

・・・新発想の進化した採尿具・・・

ハルンキット®A

各種の尿スクリーニング検査(目視法～セミオート及び尿自動分析装置)に最適

I 準 備

- ① バーコードラベルの貼付は
**外筒のストレート部が長く
貼り易い。**
- ② ハルンキットは軽量・コンパクト
で、**安価**に郵送ができます。
外径 **約 19.5mm**
重量 **約 9g**

郵 送：安 価

II 採 尿

- ① 広い採尿口で採尿が容易です。
- ② **ネジ式で確実に閉められます。
尿もれの不安がありません。**
- ③ 自宅採尿の際、ゴミが発生
しません。
- ④ チャック袋の併用で万一の
尿もれにも安心です。

採尿：簡単・清潔

尿もれ：ネジ設計で安心

III 検 査


- ① 採尿量は**約4ml**採取できます。
- ② 口内径は**約13mm**です。
スピッツ内の液高も**約62mm**
確保でき、**6項目**の尿試験紙
の検査も容易です。
**スティックの短い (82mm)
ウロペーパーⅢ4U および 4
も容易にディップできます。**
- ③ **尿自動分析装置等機械検査
が可能。**(シスメックスラック
の底上げゴムを外してご使用
頂くとより適合します。)

自動検査：機械に適合
■ 尿自動分析装置

栓を横倒して開栓可能



ウロペーパーⅢ4Uおよび4

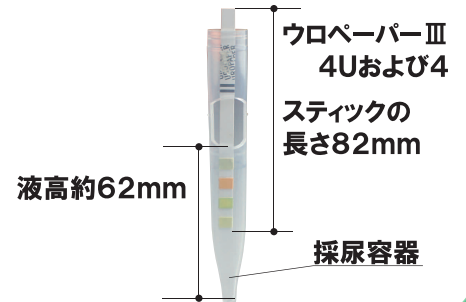

ハルンキットA (黄色半透明・PP製)

部品名	概寸 最大径×長さ(mm)
栓	19.5×28
採尿容器	14.5×104
外筒	19.5×106.5

使用上の注意

・採尿用途以外には使用しないでください。

採尿器の廃棄処理

- ・市町村の廃棄処理区分に従ってください。
- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・ウロペーパーは栄研化学㈱の登録商標です。

製造発売元 旭電機化成株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号

TEL : (06)6976-1371 FAX : (06)6976-8940

E-mail : harnkit@smile-asahi.co.jp

特許申請中

®登録商標